

立式压力蒸汽灭菌器

BXM-VF系列

■ 仟博品系

适用灭菌物:

培养基、器械、玻璃器皿及容器、废弃物等常规灭菌物的高压蒸汽灭菌;

大体积的致密灭菌物(如织物、包裹、大瓶培养基)此产品有正压脉动程序保障冷空气排放彻底,提高蒸汽穿透性,保障灭菌效果;

对于灭菌后需要干燥的样品,比如:器械、织物等,此系列自带脉动真空干燥功能,避免了灭菌后转移干燥过程中二次污染的风险。

◆ 产品特点:

BXM-VF是BXM-VE的升级产品,特点相似,部分新增功能如下:

- PMMA II微电脑智能操作系统,功能升级更加强大
- 具备真空干燥功能,保证织物、器皿等需要干燥的样品灭菌后一次性干燥到位,避免转移干燥时造成二次污染

◆ 安全保障:

故障检测功能,超温停机保护、断水保护、超压自泄保护、防烫保护、过载保护、短路保护、漏电保护、超压停机保护、独立电子超压保护等多重安全保障

◆ 选配件:


- 排汽过滤系统: 0.2 μ m孔径耐温耐压过滤器
- 专用打印机:实现打印日期、时间、温度、灭菌过程及曲线的打印
- 样品探头: 实现FO值的打印
- 验证孔转接头




冷凝桶



打印机电源插座

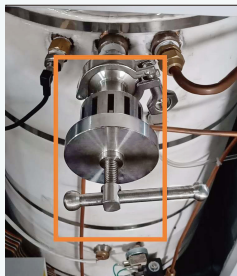

验证孔转接头

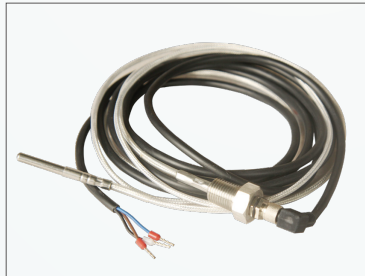

样品温度探头



操作面板

性能参数:

型号	BXM-60VF	BXM-85VF	BXM-110VF
容积/桶径			
容积 [L]	60	85	110
桶径 [mm]	400		
灭菌温度			
灭菌 [°C]	105-135		
温度波动 [°C]	< +1		
温度均匀性 [°C]	≤±0.5		
干燥 [°C]	80 -130		
融化 [°C]	50 -100		
保温 [°C]	40 - 60		
灭菌时间			
灭菌 [min]	0-120(0 - 6000定制)		
干燥 [min]	10 - 6000		
融化 [min]	0 - 6000		
保温 [min]	0 - 6000		
预约 [min]	99Hrs60		
灭菌压力			
设计/工作 [MPa]	0.38 / 0.22		
压力表范围 [MPa]	-0.1 - 0.5		
工作环境			
电源/温度/湿度	220V±22V, 50HZ±1HZ / 5℃ - 40℃ / 20%RH - 80%RH		
外形尺寸			
长度 [mm]	585	585	585
宽度 [mm]	750	750	750
高度 [mm]	1075	1165	1275
网篮尺寸			
直径 [mm]	370	370	370
高度 [mm]	245	285	245
数量 [个]	2	2	3

(备注: 1.VF系列的脉动真空干燥功能开启会伴随高压泄水, 所以安装时必须具备地漏或选配大容量储水箱; 2.VF系列可根据灭菌物的蒸汽穿透难易程度自定义6级正压脉动;
3.根据灭菌物态和灭菌容器装载量不同, 灭菌结束之后可以自定义6级不同泄压速率; 注: 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。

上海博讯医疗生物仪器股份有限公司

Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址: 上海市中山北路198号申航大厦9层

联系电话: 021-56980111 传真: 021-56303876

公司邮箱: boxun@boxun.com.cn

公司网址: www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我們