

精密可程式烘箱

BXH-S系列

■ 万博品系

适用范围:


常规实验样品干燥；烘箱干燥法干燥失重；微生物实验室用于烘箱干热灭菌；制药行业用于器具高温法除热源；化工或材料学研究中，利用程序升降温功能对样品进行溶解或者烘干等。另外，此款烘箱具备强大的数据管理功能，保障设备运行过程数据的可追溯性，特别适合目前制药行业法规所要求的数据管理要求。

产品特点:

- 5寸高清触摸屏，BRIGHT II控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 带有数据储存功能，可储存400万条数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯
- 多级密码管理功能，防止随意操作
- 带有预约功能，可按照公历时间进行预约
- 带有序升温功能，可控制升温 and 降温速率
- 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保设备无人值守时的安全运行
- 可编程序设计，可设置30段99周期
- 电动10段控制排风口开度，可满足不同换风速率需求
- 风机6段调速，可保证实验样品不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 可实时查看仪器温度记录数据和曲线，报警记录信息等

结构特点:


- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性
- 采用铝箔全封闭5cm超厚保温层，保温效果好，玻璃纤维零泄漏，适合洁净实验室使用
- 抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位，搁板采用加强型设计，负载能力提高1.5倍以上
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 标配2路485接口和1个USB接口
- 可选配进出风过滤器

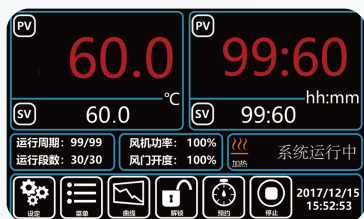


操作主界面



预约计时界面

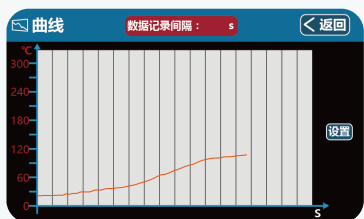

数据曲线查看

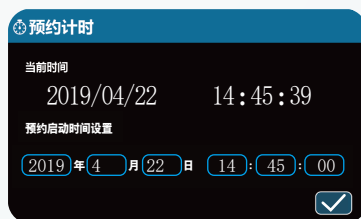

U盘导出界面

BXH-S系列性能参数:

型号	BXH-65S	BXH-130S	BXH-280S	BXH-450S	BXH-530S
体积					
体积 [L]	64	129	284	452	531
外形尺寸					
长度 [mm]	575	735	885	774	1235
宽度 [mm]	608	658	788	845	850
高度 [mm]	637	757	932	1574	1080
内胆尺寸					
长度 [mm]	410	570	720	600	1070
宽度 [mm]	350	400	530	630	595
高度 [mm]	450	570	745	1300	835
范围					
控温范围 [°C]	室温+5-300				
定时范围	100Hrs				
预约范围 [min]	公历预约				
升温时间 [150°C]					
升温时间	17	20	20	22	22
温度均匀性/波动 [150°C]					
温度均匀性	±2	±1.9	±2.2	±2.5	±2.5
温度波动	±0.3	±0.3	±0.5	±0.5	±0.5
30S恢复时间 [150°C]	7	8	8	9	9
额定功率 [kW]					
额定功率	1.5	1.8	2.7	3.5	3.5
载物托架/承重					
标配/最多/每层承重 [块/Kg]	2/5/25	2/7/25	3/9/25	4/13/25	3/12/25
是否支持重叠放/层数	是/两层	是/两层	否	否	否

注: 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。



所有细节在线
www.shbxyl.com

上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址: 上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话: 021-56980111 传真: 021-56303876
公司邮箱: boxun@boxun.com.cn
公司网址: www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我們