

# 真空干燥箱

## BXK系列-一体式隔板加热 ■ 仟博品系

### 产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆不锈钢材料制成，半圆形四角设计更方便清洁
- 温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能
- 箱门松紧完全可由用户任意调节，整体成形的硅橡胶门封条，确保箱内高真空
- 工作室为长方形结构，箱门采用钢化、防弹双层玻璃门，使观察工作室培养物品能让用户一目了然
- 具有因停电、死机造成状态数据和保存的参数记忆丢失，来电恢复功能

### 升级功能:

#### 隔板加热:

- 加热单元均匀分布在载物隔板下面，升温效率提高50%以上
- 相比套式加热，热能散失也得到了大幅降低
- 在高真空情况下，提高了热传导效率，隔板的热量更均匀，样品的干燥效率和干燥均匀度也大幅提升

#### 独立控温:


- 多层加热隔板独立控温，直接显示每层隔板的温度，提升了多层样品干燥效率的同步性；在样品量少的情况下，可以单独开启部分加热层，具备更好的节能应用

#### 隔音机柜:

- 一体式设计，标配真空泵内置于降噪机柜内，即节约了使用空间，还比外接真空泵提高了实验室的整洁度。机柜的降噪设计使噪音降低40%以上



真空仪表

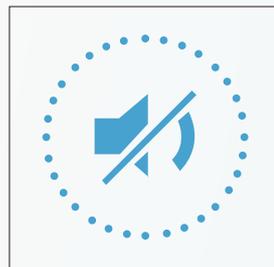

静音柜



控制面板

## 性能参数:

型号	BXK-30	BXK-50	BXK-100	BXK-250	BXK-500
<b>产品类型</b>					
产品类型	液晶显示				
<b>电源电压</b>					
电源电压	220V±10V 50/60Hz			380V±10V 50/60Hz	
<b>输入功率</b>					
输入功率 [W]	450	900	1400	2200	3900
<b>温度</b>					
控温范围 [°C]	室温+2~250				
温度波动度 [°C]	±0.5				
达到真空度 [Pa]	133				
<b>真空泵抽率</b>					
真空泵抽率 [L/S]	2	2	2	4	6
<b>容积</b>					
容积 [L]	30	53	100	250	500
<b>内胆尺寸</b>					
长度 [mm]	320	415	450	600	630
宽度 [mm]	320	370	500	600	810
高度 [mm]	300	345	450	700	845
<b>外形尺寸</b>					
长度 [mm]	480	575	620	770	800
宽度 [mm]	530	550	640	780	990
高度 [mm]	1015	1060	1165	1515	1660
<b>加热方式</b>					
加热方式	隔板加热				
<b>载物托架</b>					
托架数量 [块]	1 (独立控温)	2 (独立控温)	2 (独立控温)	3 (独立控温)	4 (独立控温)
<b>定时范围</b>					
定时范围 [min]	0-9999				

注: 隔板与加热元件固定安装, 隔板不可抽取。 所有型号标配真空泵; 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。



所有细节在线  
www.shbxyl.com

## 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址: 上海市中山北路198号申航大厦9层  
联系电话: 021-56980111 传真: 021-56303876  
公司邮箱: boxun@boxun.com.cn  
公司网址: www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们