

# 卧式压力蒸汽灭菌器

BXW系列 ■ 佰博品系

## 产品特点:

灭菌器内室采用优质不锈钢材料经过氩弧焊接而成，经久耐用  
 灭菌全过程采用微电脑自动控制，自动化程度高，出现故障会自动报警提示  
 显示屏显示灭菌阶段及温度时间等参数，便于用户掌握运行情况  
 密封圈采用自胀式结构设计，具有密封效果好，使用寿命长特点  
**采用符合法规要求的安全联锁装置:**

- (1) 门未关闭锁紧时，灭菌程序不能启动
- (2) 内室有压力时，锁紧装置启动，防止手轮转动，保证用户安全

**灭菌器自带蒸汽发生器和加水泵，该装置具有以下功能:**


- (1) 加水泵自动进水、补水功能，使蒸汽发生器中的水位控制在合理范围内
- (2) 蒸汽发生器内的水位达到水位最低值时，能够切断电热管电源，并报警提示（在灭菌状态下）
- (3) 具有独立压力控制器对蒸汽发生器压力进行保护及安全阀超压自泄双重保护功能

灭菌结束后的排气方式可选择，以适应不同类型的物质灭菌后的泄压要求

PID控温功能，通过选择可以自动修正加热控制参数，防止温度过冲发生

注：G型为干燥型，在以上性能特点基础上增加了真空泵及干燥电热管装置，干燥效果符合相关标准要求

选配：不锈钢外壳

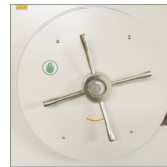

辐栅结构

## 性能参数:

型号	BXW-280SD-A	BXW-280SD-G	BXW-360SD-A	BXW-360SD-G	BXW-500SD-A	BXW-500SD-G
结构						
结构	横担结构	横担结构	辐栅结构	辐栅结构	辐栅结构	辐栅结构
灭菌室尺寸						
直径 [mm]	600	600	700	700	700	700
长度 [mm]	1050	1050	1050	1050	1450	1450
容积						
容积 [L]	280	280	360	360	500	500
灭菌温度						
灭菌温度 [°C]	109-131					
适用电源						
电压/功率 [V/Hz]	380/50					
外形尺寸 [mm]						
长度 [mm]	911	911	911	911	911	911
宽度 [mm]	1432	1432	1432	1432	1832	1832
高度 [mm]	1803	1803	1803	1803	1803	1803
功率						
功率 [Kw]	13	14.5	16	17.5	17	18.5

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。