



扫二维码
联系我们

我们为您创造更多!



上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

专业的实验室设备和生命科学仪器制造商

博大精深 迅而不紊

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

联系地址: 上海市中山北路198号申航大厦9层

联系电话: 021-56980111

公司邮箱: boxun@boxun.com.cn

公司网址: www.shbxyl.com www.boxun.com.cn

博大精深 迅而不紊

等级简要说明:

博迅含义来源于：博大精深，迅而不紊。历经二十多年的发展历程，为顺应时代发展和市场需求，产品不断更新迭代，为使产品更有辨识度将产品等级化，以“元、佰、仟、万”加“博迅”的“博”字来命名产品的等级分类。元博品系、佰博品系、仟博品系、万博品系.....亿博品系等等

2020—2021

- 元博品系
- 佰博品系
- 仟博品系
- 万博品系

Products Catalog 》

※ 本公司保留对样本内产品规格、外型、技术参数等修改的权利，如有改动，恕不另行通知，并以实际产品为准。

CONTENT

目 录

公司介绍	01-05
公司简介	01
公司荣誉	02-03
企业文化	04
发展历程	05
销售网络	06
灭 菌 器	07-21
手提式压力蒸汽灭菌器	07
立式压力蒸汽灭菌器	07-13
全自动高压灭菌器	14-17
卧式压力蒸汽灭菌器	18
卧式脉动真空灭菌器	19-20
干热灭菌器	21
培 养 箱	22-37
双制式培养箱系列	22-28
生化培养箱	22-25
霉菌培养箱	22-25
振荡培养箱	22-25
恒温恒湿箱/霉菌培养箱（控湿）	26
全温恒温箱	27-28
单制式培养箱系列	29-37
隔水式培养箱	29
电热恒温培养箱	30-33
微生物培养箱	34-35
二氧化碳细胞培养箱	36-37
植 物 培 养 箱	38-42
光照培养箱	38-39
人工气候箱	38-39
层照培养箱	40-42

干燥箱/高温炉	43-51
电热鼓风干燥箱	43-48
精密可程式烘箱	49-50
电阻炉	51
真 空 干 燥 箱	52-56
台式真空干燥箱	52
台式隔板加热真空干燥箱	52-53
一体式隔板加热真空干燥箱	54
一体式真空显示隔板加热真空干燥箱	55-56
试 验 箱 / 试 验 室	57-73
可扩展试验箱	57-62
药品稳定性试验箱	63-68
综合药品稳定性试验箱	63-68
高低温交变试验箱	69-70
步入式试验室	71-73
净 化 安 全 设 备	74-79
净化工作台	74-76
生物安全柜	77-79
摇 床 / 振 荡 器	80-87
台式智能精密摇床	80
立式智能精密摇床	81-82
卧式智能精密摇床	83-84
叠式智能精密摇床	85
水浴/气浴振荡器	86
摇瓶机	87
水 槽	88-90
水浴	88-89
油槽	90
软 件 监 控 平 台	91-92

Company Profile 公司介绍



公司简介

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司成立于1996年，前身为上海博迅实业有限公司。公司专业生产实验室设备和生命科学仪器，是集研发、设计、制造、销售与服务为一体的现代化企业，属上海医疗器械行业协会副会长单位。公司已率先通过ISO9001国际质量管理体系认证和ISO13485医疗器械专业质量体系认证。

公司主要产品有：试验箱系列、灭菌器系列、干燥箱系列、培养箱系列、净化台系列、安全柜系列、水温箱系列等基础实验室设备和生命科学仪器，并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。

在二十多年发展历程中，我们一直秉承“客户第一，服务无限”的经营理念，以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖全国各地，远销国外。

如今，公司沿用和美国合作的先进技术，在原有第一代产品的生产制造基础上，对产品全面进行功能上的优化和人性化的设计，并提供实验室设备和生命科学仪器的解决方案，进一步满足您更高的实验要求。



Group Honor 公司荣誉



公司荣誉

GROUP HONOR
>>> >>>

设备厂获ISO9001:2015国际质量管理体系认证证书
设备厂获ISO13485:2016医疗器械专业质量管理体系认证证书
荣获“高新技术企业证书”
荣获“2016科学仪器行业最具影响力国内生产厂商”称号
荣获上海中小企业“品牌企业”称号
荣获上海市“五星级诚信创建企业”





灭菌器0G200514.SBMQT75

培养箱0G200514.SBMQT79



干燥箱0G200514.SBMQT76

试验箱0G200514.SBMQT81



Corporate Culture 企业文化



- **企业文化:**
企业利益永远高于个人利益。实事求是，将每一件事情做好。以人为本，以德为本。团队合作，精密配合
- **企业使命:**
创优质产品，服务于人类的生命科学事业
- **企业价值观:**
以实现人类社会价值体现企业价值
- **企业经营宗旨:**
诚心、诚信、诚意
- **企业精神:**
锐意进取、精诚合作、艰苦创业、团队合作
- **企业生产理念:**
高要求、高标准、高质量
- **企业服务理念:**
及时、准确、满意



Development History 发展历程

发展历程 DEVELOPMENT HISTORY >>> >>>

1996 博迅成立于上海

20年前博迅抓住了时代赋予的机会，从事基础设备制造

通过ISO质量体系认证

06-16年十年间，博迅奋发图强，渠道建设成功，将博迅的标签贴到了全国的各个角落。截止16年，我们年产量突破3万，平均单日出货量超过100台。我们努力沉淀，不敢冒进，这是踏踏实实的十年，也是博迅飞跃的资本。

成立立德泰劬子公司

2016年公司更名为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司，新三板挂牌上市

调整、优化产品

2020年，公司重新调整产品外观设计，优化性能，明确定位。将部分产品线进行深挖和扩展。将多年来推出的产品划分出明确等级代系，且命名为“元博”、“佰博”、“仟博”、“万博”，旨在让所有目标客户都能有合适的产品可以匹配。

2002 1998年加入上海医疗器械行业协会
1999年年销售额达1千万
2001新生产基地建立，占地11080平方

2009 通过CE认证

2010 2014年第二生产基地建成投产，占地10000平方

2017 评为上海高新技术企业

2020 量的增加必然带来质的飞跃。20年沉淀博迅对自己提出了更高的要求：我们要研发生产最具市场竞争力的产品！我们要引导中国基础设备制造的新潮！我们要把民族品牌推向世界！

Selling Network 销售网络

博迅公司总部坐落在东方的“巴黎”-上海市，在二十年的发展历程中，我们一直秉承“客户第一，服务无限”的经营理念，以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可，销售网络覆盖全国各地，除西藏和青海外，每个省份及直辖市都有博迅公司的业务经理，负责每个区域的销售和售后服务。



手提式压力蒸汽灭菌器

YXQ-LS-18SI 元博品系



灭菌内桶

产品特点:

- 电加热方式
- 断水自控
- 自涨式密封 超压自泄
- 压控温度设定范围 (110℃-126℃)
- 灭菌时间设定范围 (0-60min)

立式压力蒸汽灭菌器

BXM-30R 元博品系



产品特点:

- 采用SUS304不锈钢
- 微电脑智能化控制
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 断水自控
- 超温保护 超压自泄
- 灭菌器终了蜂鸣器提醒

立式压力蒸汽灭菌器

YXQ-SII 元博品系



测试孔



网篮



产品特点:

- 采用SUS304不锈钢
- 手轮式快开盖结构
- 微电脑智能自动控制
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全连锁
- 灭菌器终了蜂鸣器提醒
- 标配G1/2 A的内螺纹样品测试孔

性能参数:

型号	YXQ-LS-18SI	BXM-30R	YXQ-30SII	YXQ-50SII	YXQ-75SII	YXQ-100SII
尺寸-外部尺寸						
长度 [mm]	—	395	445	485	485	485
宽度 [mm]	390	395	445	485	485	485
高度 [mm]	530	780	900	1120	1190	1290
尺寸-内腔尺寸						
直径 [mm]	280	300	300	400	400	400
高度 [mm]	290	420	485	630	720	830
提篮尺寸						
直径 [mm]	—	280	280	360	360	360
高度 [mm]	—	340	340	230	270	230
个数 [个]	1	1	1	2	2	3
容积/重量						
容积 [L]	18	29	29	50	75	100
重量 [kg]	16	34	34	64	68	71
电源/功率						
电源 [V]	220	220	220	220	220	220
功率 [kW]	2	2	2.3	3.2	3.5	3.5
极限工作/设计温度						
极限工作温度 [°C]	126	126	135	135	135	135
设计温度 [°C]	128	128	139	139	139	139
极限工作/设计压力						
极限工作压力 [MPa]	0.142	0.142	0.22	0.22	0.22	0.22
设计压力 [MPa]	0.165	0.165	0.25	0.25	0.25	0.25
灭菌时间						
灭菌时间 [min]	0-60	0-120	4-120	4-120	4-120	4-120

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。



所有细节在线
www.shbxyl.com

立式压力蒸汽灭菌器

YXQ-A 佰博品系



产品特点:

- 采用SUS304不锈钢
- 手轮式快开盖结构
- 微电脑智能自动控制
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 内循环排汽式
- 断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全连锁
- 灭菌器工作结束蜂鸣器提醒
- 标配G1/2 A的内螺纹样品测试孔

三种模式控制:

- a.加热-灭菌-快排
- b.加热-灭菌-慢排
- c.加热-灭菌-不排

选配: 熔化保温功能

熔化温度: 60-98℃, 熔化时间: 0-999min
保温温度: 40-60℃, 保温时间: 0-999min

立式压力蒸汽灭菌器

YXQ-G 佰博品系



产品特点:

- 干燥功能
- 采用SUS304不锈钢
- 手轮式快开盖结构
- 微电脑智能自动控制
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 内循环排汽式
- 断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全连锁
- 灭菌器终了蜂鸣器提醒
- 标配G1/2 A的内螺纹样品测试孔

三种模式控制:

- a.灭菌、自然冷却
- b.灭菌、自动排汽
- c.灭菌、排汽、排水、干燥

选配: 熔化保温功能

熔化温度: 60-98℃, 熔化时间: 0-999min
保温温度: 40-60℃, 保温时间: 0-999min

性能参数:

型号	YXQ-50A	YXQ-70A	YXQ-100A	YXQ-50G	YXQ-75G	YXQ-100G
尺寸-外部尺寸						
长度 [mm]	445	485	485	485	485	485
宽度 [mm]	525	605	605	605	605	605
高度 [mm]	1120	1170	1290	1120	1190	1290
尺寸-内腔尺寸						
直径 [mm]	300	400	400	400	400	400
高度 [mm]	755	720	830	640	720	850
提篮尺寸						
直径 [mm]	280	360	360	360	360	360
高度 [mm]	210	270	230	230	270	230
个数 [个]	3	2	3	2	2	3
容积/重量						
容积 [L]	50	75	100	50	75	100
重量 [kg]	67	73	77	74	79	84
电源/功率						
电源 [V]	220	220	220	220	220	220
功率 [kW]	2.7	3.5	3.5	3.2	3.5	3.5
极限工作/设计温度						
极限工作温度 [°C]	135	135	135	135	135	135
设计温度 [°C]	139	139	139	139	139	139
极限工作/设计压力						
极限工作压力 [MPa]	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
设计压力 [MPa]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
灭菌时间						
灭菌时间 [min]	4-120	4-120	4-120	4-120	4-120	4-120
干燥功率						
干燥功率 [kW]	/	/	/	0.8	0.8	1

注: 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。



所有细节在线
www.shbxyl.com

产品细节:



控制面



不锈钢提篮



测试孔

立式压力蒸汽灭菌器

BXM-VE系列 ■ 仟博品系 该系列灭菌器采用全新的外观设计，给予用户更便捷操作体验。

适用范围：



科研 制药 农业 玻璃器皿

◆ 产品特点：

- PMMA I 微电脑智能操作系统，功能强大
- 大尺寸电容触屏，可实时查看设备工作阶段运行参数及工作状态图
- 具备8种固定程序+6种自定义程序
- 正压脉冲，可设6级冷空气排放程序，确保冷空气排放彻底
- 灭菌结束后，6级泄压速率可选
- 具备工程师、管理员、操作员三级权限管理

◆ 人性化设计：

- 整机防烫设计，既隔热又美观
- 经典手轮式开门结构，同时具备压力机械自锁与闭盖自检双重保护
- 一键电动排水，操作更便捷
- 具备100小时倒计时预约功能
- 具备沸点设置功能，确保仪器在高海拔下能够升温至所需灭菌温度
- 标配冷凝器+风冷+二级水冷的快速冷却系统，缩短开盖等待时间
- 标配1个防水插座、2个485接口和G1/2A标准检测管螺纹孔

◆ 安全保障：

故障检测功能，超温停机保护、断水保护、超压自泄保护、防烫保护、过载保护、短路保护、漏电保护、独立电子超压保护等多重安全保障

◆ 选配件：


- 排汽过滤系统：0.2μm孔径耐温耐压过滤器
- 专用打印机：实现日期、时间、温度、灭菌过程及曲线的打印
- 样品温度传感器：实现F0值的打印
- 验证孔转接头




操作面板



打印机

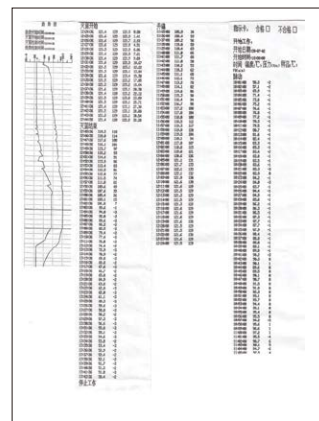

打印数据

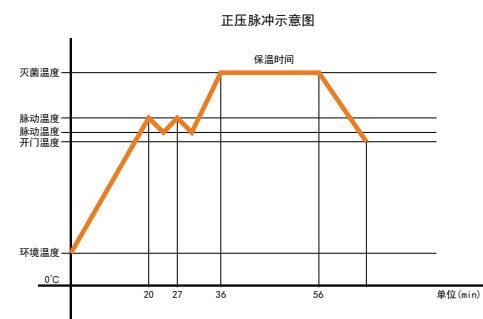

立式压力蒸汽灭菌器

BXM-VF系列 ■ 仟博品系

适用灭菌物：

培养基、器械、玻璃器皿及容器、废弃物等常规灭菌物的高压蒸汽灭菌；

大体积的致密灭菌物（如织物、包裹、大瓶培养基）此产品有正压脉动程序保障冷空气排放彻底，提高蒸汽穿透性，保障灭菌效果；

对于灭菌后需要干燥的样品，比如：器械、织物等，此系列自带脉动真空干燥功能，避免了灭菌后转移干燥过程中二次污染的风险。

◆ 产品特点：

BXM-VF是BXM-VE的升级产品，特点相似，部分新增功能如下：

- PMMA II 微电脑智能操作系统，功能升级更加强大
- 具备真空干燥功能，保证织物、器皿等需要干燥的样品灭菌后一次性干燥到位，避免转移干燥时造成二次污染

◆ 安全保障：

故障检测功能，超温停机保护、断水保护、超压自泄保护、防烫保护、过载保护、短路保护、漏电保护、超压停机保护、独立电子超压保护等多重安全保障

◆ 选配件：


- 排汽过滤系统：0.2μm孔径耐温耐压过滤器
- 专用打印机：实现打印日期、时间、温度、灭菌过程及曲线的打印
- 样品探头：实现F0值的打印
- 验证孔转接头



冷凝桶



打印机电源插座

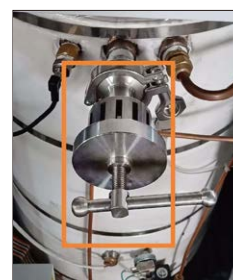

验证孔转接头



样品温度探头



操作面板

性能参数:

型号	BXM-60VE	BXM-85VE	BXM-110VE	BXM-60VF	BXM-85VF	BXM-110VF
容积/桶径						
容积 [L]	60	85	110	60	85	110
桶径 [mm]	400					
灭菌温度						
灭菌 [°C]	105-135					
温度波动 [°C]	< +1					
温度均匀性 [°C]	≤±0.5					
干燥 [°C]	/			80 -130		
融化 [°C]	50 -100					
保温 [°C]	40 - 60					
灭菌时间						
灭菌 [min]	0-120(0 - 6000定制)					
干燥 [min]	/			10 - 6000		
融化 [min]	0 - 6000					
保温 [min]	0 - 6000					
预约 [min]	99Hrs60					
灭菌压力						
设计/工作 [MPa]	0.38 / 0.22					
压力表范围 [MPa]	0 - 0.4			-0.1 - 0.5		
工作环境						
电源/温度/湿度	220V±22V, 50HZ±1HZ / 5℃ - 40℃ / 20%RH - 80%RH					
外形尺寸						
长度 [mm]	535	535	535	585	585	585
宽度 [mm]	640	640	640	750	750	750
高度 [mm]	1075	1165	1275	1075	1165	1275
网篮尺寸						
直径 [mm]	370	370	370	370	370	370
高度 [mm]	245	285	245	245	285	245
数量 [个]	2	2	3	2	2	3
(备注: 1.VF系列的脉动真空干燥功能开启会伴随高压泄水, 所以安装时必须具备地漏或选配大容量储水箱; 2.VE、VF系列可根据灭菌物的蒸汽穿透难易程度自定义6级正压脉动; 3.根据灭菌物态和灭菌容器装载量不同, 灭菌结束之后可以自定义6级不同泄压速率; 注: 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。						



所有细节在线
www.shbxyl.com

全自动高压灭菌器

生物安全型脉动真空M系列 ■ 万博品系

适用灭菌物:

培养基、器械、玻璃器皿及容器等常规灭菌物的高压蒸汽灭菌; 相对密封的容器灭菌 (西林瓶、蓝盖瓶等)、大体积的致密灭菌物如大器械包, 大瓶培养基, 致密织物包), 这些灭菌物有预真空功能保障冷空气排放彻底程度, 提高蒸汽穿透性, 保障灭菌效果; 对于灭菌后需要干燥的样品, 比如: 器皿、器械、织物、衣物等, 此款灭菌器自带脉动真空干燥功能, 干燥效果良好, 避免了灭菌后转移干燥过程中二次污染的风险; 生物污染型废物灭菌, 此款灭菌锅在排冷空气时具备高效过滤系统, 能有效隔离生物危害。

◆ 产品特点:

- 采用金属材料与塑料件的有机结合, 在保证机体经久耐用的情况下有效隔绝工作状态时过高的表面温度, 保障操作安全
- 全新一键式电动开门结构, 具备机械自锁与电子联锁双重保护
- PMMA III操作系统, 液晶触摸屏, 触显一体, 由微电脑智能程序控制, 易于操作、读取信息
- 具有16种自定义模式可设定并保存, 方便客户根据不同灭菌物预设不同灭菌程序, 然后每次使用时直接调用
- 带有数据储存功能, 并可用U盘以不可更改文件格式进行数据导出备份, 保证灭菌过程的可追溯性
- 蒸汽发生完全隔离于腔体, 灭菌腔体内无任何加热元件, 提高了腔体的利用率和升温效率, 易清洁保养
- 具备预真空功能, 保证冷空气排放彻底, 提高饱和蒸汽穿透力
- 具备脉动真空干燥功能, 确保特殊样品灭菌后能够直接干燥, 且腔体内无明水, 干燥时无需高压排水
- 灭菌腔体与灭菌网篮均为SUS304不锈钢材料制成, 耐酸、碱、腐蚀
- 灭菌腔体采用镜面抛光工艺, 方便腔体清洁
- 标配冷凝器+风扇快速冷却系统, 缩短开盖等待时间
- 内置高效过滤系统, 即能保障冷空气排放时的生物污染隔离, 又能避免负压补偿时外界空气对灭菌样品的污染
- 双自动加水通道, 可自选水源, 并在缺水时自动加水
- 标配样品温度探头, 可对灭菌物品温度进行实时监控, 避免繁琐的灭菌工艺验证
- 带有C.W.S循环水可利用系统, 可将灭菌过程中产生的冷凝水循环使用
- 带有W.P.S废水废气净化系统, 可将废弃物灭菌过程中产生的水气进行有效过滤后排出



全自动高压灭菌器

性能参数:

型号	BXM-50M	BXM-75M	BXM-100M	BXM-120M	BXM-150M
温度					
灭菌温度 [°C]			105-135		
干燥温度 [°C]			102		
融化温度 [°C]			40-100		
保温温度 [°C]			25-85		
时间					
灭菌时间 [min]			4-999		
干燥时间 [min]			0-999		
融化时间 [min]			0-999		
保温时间 [min]			0-999		
预约时间 [min]			99Hrs60		
压力					
设计压力 [MPa]			0.25		
工作压力 [MPa]			0.22		
脉动真空/干燥度					
脉动真空 [Freq]			0,2-99		
干燥度			< 1%		
容积/加热功率					
容积/加热功率 [L/kW]	50/5.1	75/5.9	100/6.8	120/9.9	150/10.5
环境					
电源	220V±22V,50HZ±1HZ			380V±38V,50HZ±1HZ	
温度 [°C]	5-40				
湿度 [RH]	20%-80%				
外形尺寸					
长度 [mm]	750	750	750	850	850
宽度 [mm]	800	800	800	910	910
高度 [mm]	950	1080	1180	1080	1180
内腔尺寸					
直径 [mm]	400	400	400	500	500
高度 [mm]	520	700	870	740	870
网篮					
直径 [mm]	360	360	360	460	460
高度 [mm]	200	180	180	200	180
数量 [个]	2	3	4	3	4

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。



所有细节在线
www.shbxyl.com


全自动高压灭菌器



程序选择界面



用户权限设置

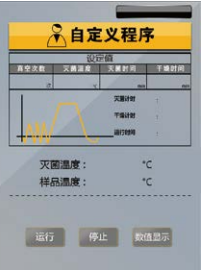

自定义程序

产品结构图（以BXM-50M为例）



功能配置表:

配置名称	●为标准配置 ○为可选配置
压力自动锁装置	●
闭盖检查系统	●
超温保护功能	●
断水保护系统	●
超压保护功能	●
超压自动泄压功能	●
电动开关门	●
预热功能	●
故障自检功能	●
预约功能	●
融化保温功能	●
自动加水	●
工作状态图	●
快速冷却（冷风）	●
空气过滤器	●
循环水可利用系统：可将灭菌过程中产生的冷凝水循环使用	●
废水废气净化系统：可将废弃物灭菌过程中产生的水气进行有效过滤后排出	●
单线样品温度探头	●
托盘：可置于网篮底部	○
加水口：2个（纯水和自来水）	●
数据储存/导出	●
辅助提升机：方便置放、提取灭菌物品	○
废液收集箱：用于收集废水废气(用户无地漏情况)	○
打印机：思普瑞特色带、热敏(国产),可打印时间、温度、压力、F0值及过程曲线	○
打印机：爱普生色带(进口),可打印时间、温度、压力、F0值及过程曲线	○

卧式压力蒸汽灭菌器

BXW系列 ■ 佰博品系

产品特点:

- 灭菌器内室采用优质不锈钢材料经过氩弧焊接而成，经久耐用
 - 灭菌全过程采用微电脑自动控制，自动化程度高，出现故障会自动报警提示
 - 显示屏显示灭菌阶段及温度时间等参数，便于用户掌握运行情况
 - 密封圈采用自胀式结构设计，具有密封效果好，使用寿命长的特点
 - ◆ 采用符合法规要求的安全联锁装置：
 - （1） 门未关闭锁紧时，灭菌程序不能启动
 - （2） 内室有压力时，锁紧装置启动，防止手轮转动，保证用户安全
 - ◆ 灭菌器自带蒸汽发生器和加水泵，该装置具有以下功能：
 - （1） 加水泵自动进水、补水功能，使蒸汽发生器中的水位控制在合理范围内
 - （2） 蒸汽发生器内的水位达到水位最低值时，能够切断电热管电源，并报警提示（在灭菌状态下）
 - （3） 具有独立压力控制器对蒸汽发生器压力进行保护及安全阀超压自泄双重保护功能
- 灭菌结束后的排汽方式可选择，以适应不同类型的物质灭菌后的泄压要求
- PID控温功能，通过选择可以自动修正加热控制参数，防止温度过冲发生
- 注：G型为干燥型，在以上性能特点基础上增加了真空泵及干燥电热管装置，干燥效果符合相关标准要求

选配： 不锈钢外壳



横担结构



辐栅结构

性能参数:

型号	BXW-280SD-A	BXW-280SD-G	BXW-360SD-A	BXW-360SD-G	BXW-500SD-A	BXW-500SD-G
结构						
结构	辐栅结构	辐栅结构	辐栅结构	辐栅结构	辐栅结构	辐栅结构
灭菌室尺寸						
直径 [mm]	600	600	700	700	700	700
长度 [mm]	1050	1050	1050	1050	1450	1450
容积						
容积 [L]	280	280	360	360	500	500
灭菌温度						
灭菌温度 [℃]	109-131					
适用电源						
电压/功率 [V/Hz]	380/50					
外形尺寸 [mm]						
长度 [mm]	911	911	911	911	911	911
宽度 [mm]	1432	1432	1432	1432	1832	1832
高度 [mm]	1803	1803	1803	1803	1803	1803
功率						
功率 [Kw]	13	14.5	16	17.5	17	18.5

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。

卧式脉动真空灭菌器

卧式脉动真空灭菌器系列

仟博品系

产品特点:

- 灭菌器内室采用S30408不锈钢，夹套采用锅炉压力容器专用钢板，主体的制造采用先进的焊接工艺和检测手段，保证灭菌器主体的质量可靠、经久耐用
- 灭菌全过程采用微电脑自动控制，自动化程度高，彩色触摸屏可动态显示工作温度、压力、时间、灭菌阶段等参数，操作更直观、方便
- 设备配备了多套灭菌程序（织物、器械、液体等），也可根据用户实际情况设定工作参数
- 同时设有真空检测、BD测试程序，真空泄漏率小于0.13Kpa/min

◆ 密封门采用符合法规要求的安全联锁装置:

- （1）门未关闭锁紧时，灭菌程序不能启动
- （2）内室有压力时，密封门不能开启
- 密封圈采用压缩空气密封结构设计，具有密封效果好，使用寿命长的特点
- PID控温功能，通过选择可以自动修正加热控制参数，防止温度过冲发生

◆ 注：自产蒸汽的灭菌器备有蒸汽发生器和加水泵，该装置具有以下功能:

- （1）加水泵自动进水、补水功能，使蒸汽发生器中的水位控制在合理范围内
- （2）蒸汽发生器内的水位达到水位最低值时，能够切断电热管电源，并报警提示
- （3）采用压力控制器控制蒸汽发生器内的压力，超压后有安全阀进行保护



内室设计压力	-0.1~0.26MPa	夹层设计压力	0.26MPa
额定工作压力	0.242MPa	汽源压力	0.30MPa~0.50MPa
压缩空气源压力	0.50MPa~0.70MPa	水源压力	0.15MPa~0.30MPa
设计极限工作温度	140℃	额定工作温度	138℃
脉动次数范围	0~99次	脉动幅值	正值0.065MPa~0.09MPa
			负值-0.050MPa~-0.09MPa
干燥时间范围	0~9999秒	空气排出量	>99%（脉动次数3次以上）
安全阀整定压力	0.25MPa	回座压力	0.22MPa

性能参数:

型号	BXW-0.24JDM-D BXW-0.24JDM	BXW-0.24JDM-D BXW-0.24JDM	BXW-0.36JDM-D BXW-0.36JDM	BXW-0.36JDM-D BXW-0.36JDM	BXW-0.6JDM-D BXW-0.6JDM	BXW-1.2JDM BXW-1.2JDM	BXW-1.2JDM BXW-1.2JDM
机动门	单门	双门	单门	双门	单门	双门	双门
机动门 [单/双]	单门	双门	单门	双门	单门	双门	双门
灭菌室尺寸							
长度 [mm]	670	670	980	980	1180	1500	1500
宽度 [mm]	600	600	600	600	610	680	680
高度 [mm]	600	600	600	600	910	1180	1180
容积							
容积 [M³]	0.24	0.24	0.36	0.36	0.6	1.2	1.2
适用电源							
电压/频率 [V/Hz]				380/50			
功率							
功率 [kW]	24 1.95	24 1.95	24 1.95	24 1.95	47 2.85	43.5 4.35	43.5 4.35
重量							
重量 [kg]	504 474	656 626	728 698	816 796	1047 1027	1318	1564
外形尺寸							
长度 [mm]	916	946	1250	1305	1486	1936	1986
宽度 [mm]	1346	1346	1346	1346	1342	1430	1430
高度 [mm]	1915	1915	1915	1915	2000	1940	1940
蒸汽来源							
蒸汽来源	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接	自带 外接

1.用户可以根据需要进行单门双门、外界蒸汽或自产蒸汽等要求的选择
2.可以根据用户需求进行符合卫生要求的特殊定制
注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。

干热灭菌器

BXH-G 仟博品系

适用灭菌物:

可用于微生物实验室干热灭菌

产品特点:

- LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态
- 背光触控式按键，反应灵敏，操作便捷，故障率低
- BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 具备倒计时预约功能，预约时间范围为0-9999min
- 可编程设计：10段100周期程序设定（根据后期控制器实际情况调整）
- 风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行

结构特点:

- 抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位，搁板采用加强型设计，负载能力提高1.5倍以上
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 标配1路485接口



抽屉式搁板



门把手



排风口



操作面板



进出风过滤器（选配）

技术参数:

详见50页

生化/霉菌培养箱

SPX-Z/ MJX-Z系列 元博品系



应用范围:

本产品适用于环境保护、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。

产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节
- 温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高
- 具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节
- 显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越
- 具有定时和计时功能
- 工作室内置照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察（霉菌培养箱为紫外线杀菌灯）
- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能



温度传感器



观察窗



载物搁架



生化/霉菌培养箱

SPX-ZII/ MJX-ZII系列 佰博品系




应用范围:

本产品适用于环境保护、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。

产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节
- 采用PMMA I操作系统，控温精度高，性能稳定，具有超温报警、自我诊断功能
- 背光触控式按键设定，具有温度、时间调节控制，便于观察和操作
- 数码液晶背光显示，示值直观，简单易懂，性能优越
- 具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大造成样品挥发
- 工作室内置8W的照明灯（霉菌培养箱为8W的紫外线杀菌灯），便于观察
- 带有保温功能的大视角真空钢化玻璃窗，方便用户观察内部状况
- 设备腔体内标配220V电源插座，方便客户在箱体内直接接入其他设备使用
- 采用变频式制冷系统，环保制冷剂（R134a），高效率，低能耗，全温段持续无霜运行
- 采用进口降噪压缩机组，噪音低，性能稳定
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失

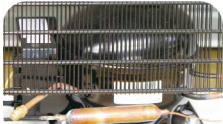

生化/霉菌培养箱

性能参数:

型号	SPX-100B-Z MJX-100B-Z	SPX-150B-Z MJX-160B-Z	SPX-250B-Z MJX-250B-Z	SPX-100B-ZII MJX-100B-ZII	SPX-150B-ZII MJX-160B-ZII	SPX-250B-ZII MJX-250B-ZII
容 积						
容 积	100	150	250	100	150	250
性 能 指 示						
产品类型SPX系列生化培养箱/MJX系列霉菌培养箱						
控温范围 [℃]	0-50			0-60		
分辨率 [℃]	0.1					
波动度 [℃]	±2			±1		
均匀度 [℃]	±2			±1.5		
输入功率 [W]	300	300	360	500	500	760
定时范围	0-999h			0-9999min(可切换)		
内 胆 尺 寸						
长度 [mm]	450	500	505	500	500	500
宽度 [mm]	380	335	450	370	370	440
高度 [mm]	585	955	1100	580	815	1100
外 形 尺 寸						
长度 [mm]	580	595	615	580	595	615
宽度 [mm]	570	580	620	570	580	620
高度 [mm]	1070	1232	1597	1070	1232	1597
载物托架						
数量[标配/最多] [块]	2/3	3/5	3/7	2/3	3/5	3/7
每层搁板承重 [Kg]	15					
制冷剂	R134a					
注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，工作环境温度：10-30℃ 工作电源：220V+10V 50/60Hz 性能参数若有变更，恕不另行通知。						



所有细节在线
www.shbxyl.com

生化/霉菌/振荡培养箱

BSP/ BMJ/BSD系列

佰博品系



应用范围:

本产品适用于环境保护、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。

产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节
- 采用PMMA II控制系统，控温精度高，性能稳定，具有超温报警、自我诊断功能
- 背光触控式按键设定，具有温度、时间调节控制，便于观察和操作
- 彩色液晶背光显示，示值直观，简单易懂，性能优越
- 具备屏锁时间、屏保密码设定功能，防止随意操作
- 可编程程序设计，可设置30段99周期
- 采用离心风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳
- 双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免观察样品时造成温度波动
- 设备左右侧各有一个内径为3cm的检测孔，方便客户在计量或者验证过程中布线
- 具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大造成样品挥发
- 具备预约和定时功能，方便客户严格把控设备的开启时间和运行时间
- 具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便客户定期进行冷凝器清洁
- 标配机械锁，防止任意开门
- 设备腔体内标配220V的防水电源插座，方便客户在箱体内直接接入其他设备使用
- 设备内标配有大功率照明灯（霉菌培养箱为紫外线杀菌灯），方便客户观察内部样品
- 采用变频式制冷系统，环保制冷剂，高效率，低能耗，全温段持续无霜运行
- 采用进口降噪压缩机组，噪音低，性能稳定
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失



液晶触摸屏



振荡器数控面板



承重搁板



振荡器



玻璃锁组



紫外线灯

生化/霉菌/振荡培养箱

振荡培养箱振荡器参数：

- 起动~220转/分 可调（回旋）；振幅：20mm
- 起动~300次/分 可调（往返）；振幅：30mm
- BSD-100:370×300×200 BSD-150:420×320×200
- BSD-250:420×320×200 BSD-400:500×500×200
- 注：长×宽×高，长×宽为振荡器摇板的外形尺寸，高为振荡器总高度，夹具为弹簧万能夹。

性能参数：

型号	BSP-100 BMJ-100 BSD-100	BSP-150 BMJ-160 BSD-150	BSP-250 BMJ-250 BSD-250	BSP-400 BMJ-400 BSD-400	BSP-800 BMJ-800
容积					
容积 [L]	100	150	250	400	800
性能指示					
产品类型	BSP系列生化培养箱/BMJ系列霉菌培养箱/BSD振荡培养箱				
控温范围 [℃]	0-70				
分辨率 [℃]	0.1				
波动度 [℃]	±0.5				
均匀度 [℃]	±1				
输入功率 [W]	1000	1000	1100	1350	2600
输入功率[振荡箱] [W]	1050	1050	1150	1400	
定时范围 [min/h]	0-9999/0-9999（可切换）				
预约范围 [min]	0-9999				
编程控制	30段99周期				
内胆尺寸					
长度 [mm]	490	510	510	600	1220
宽度 [mm]	390	390	450	640	585
高度 [mm]	610	760	1090	1050	1123
外形尺寸					
长度 [mm]	630	650	650	745	1503
宽度 [mm]	680	680	740	930	910
高度 [mm]	1250	1400	1726	1695	1820
载物托架					
数量[标配/最多] [块]	2/4	3 /5	4/7	4/7	6/12
每层搁板承重 [Kg]	15				
制冷剂	R134a				

注：工作环境温度：10-30℃ 工作电源：220V+10V 50/60Hz 尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。



所有细节在线
www.shbxyl.com

恒温恒湿箱/霉菌培养箱(控湿)

BSC/ BMJ-C系列

佰博品系



温度



湿度

应用范围：

恒温恒湿箱系列产品有着精确的温度和湿度控制系统，可用于微生物培养、霉菌培养、果蝇培养等需要稳定温湿度环境的培养实验。

产品特点：

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节
- 微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能
- 采用离心风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳
- 双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免观察样品时造成温度波动
- 设备左右侧各有一个内径为3cm的检测孔，方便客户在计量或者验证过程中布线
- 采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能
- 标配机械锁，防止任意开门
- 集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用
- 湿度传感器采用进口元器件，采用电加热式加湿系统，外配大容量水箱，可长时间连续使用
- 可编程程序设计，可设置30段99周期
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失
- 标配有1路RS-485接口

性能参数：

型号	BSC-150	BSC-250	BSC-400	BSC-800	BMJ-160C	BMJ-250C	BMJ-400C	BMJ-800C
容积								
容积 [L]	150	250	400	800	150	250	400	800
性能指示								
产品类型	BSC系列生化培养箱/BMJ系列霉菌培养箱							
控温范围 [℃]	4-60（不控湿时）；10-40（控湿时）							
分辨率 [℃]	0.1							
波动度 [℃]	±0.5（25℃）							
均匀度 [℃]	±1（25℃）							
控湿度	控湿范围：50-90%湿度波动：±5%							
输入功率 [W]	1300	1400	1750	3800	1300	1400	1750	3800
定时范围 [min]	0-9999							
内胆尺寸								
长度 [mm]	510	510	600	1220	510	510	600	1220
宽度 [mm]	390	450	640	585	390	450	640	585
高度 [mm]	760	1100	1050	1123	760	1100	1050	1123
外形尺寸								
长度 [mm]	650	650	745	1503	650	650	745	1503
宽度 [mm]	680	740	930	910	680	740	930	910
高度 [mm]	1400	1726	1695	1820	1400	1726	1695	1820
载物托架								
数量 [块]	3	4	4	6	3	4	4	6

注：工作环境温度：10-30℃ 工作电源：220V+10V 50/60Hz 尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。



全温恒温箱

BXQ系列

■ 仟博品系



应用范围:

本产品适用于环境保护、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。

产品特点:

- ◆ 智能控制系统:
 - 5寸LCD液晶触摸屏，触摸式操作，显示直观，操作便捷
 - BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
 - 程序化多段数参数设置：30段99周期设计
- ◆ 权限分级管理功能:
 - 管理员可以将设备所有操作权限（设备具有14种不同操作功能）自定义分配给5个操作人员，且每个操作人员的操作都会在事件记录中生成唯一可追溯印记
- ◆ 数据管理功能:
 - 控制器可保存5年以上数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器温度记录数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯
- ◆ 事件管理功能:
 - 控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯
- ◆ 公历预约/定时:
 - 具备公历预约、定时功能，方便客户严格把控设备的开启时间和运行时间
- ◆ 风速可控:
 - 具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大成样品挥发
- ◆ 限温保护:
 - 具备独立限温保护功能，超过限定温度，设备自动断电，确保样品和设备安全
- ◆ 无霜运行:
 - 采用变频式制冷系统，环保制冷剂，高效率，低能耗，全温段持续无霜运行
- ◆ 噪音低:
 - 采用进口降噪压缩机组，噪音降低50%以上，性能稳定
- ◆ 完善保护功能:
 - 完善保护功能：上下限超温报警、超温停机保护、门开报警、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护



液晶触摸屏



测试孔



压缩机



485接口

结构特点:

- 双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免样品观察时造成温度波动
- 设备配置一个USB接口、两路RS-485接口
- 标配机械锁，防止随意开门
- 具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便客户定期进行冷凝器清洁
- 具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统
- 内控采用圆角式设计，方便清洁
- 设备左右侧各有一个内径为3cm的检测孔，方便客户在计量或者验证过程中布线
- 设备腔体内标配220V防水电源插座，方便客户在箱体内直接接入其他设备使用
- 设备内标配有8w的照明灯，方便客户观察内部样品

选配:

- 打印机、短信报警、在线监控平台

性能参数:

型号	BXQ-100	BXQ-150	BXQ-250	BXQ-400	BXQ-800	BXQ-1000
容积						
容积 [L]	100	150	250	400	800	1000
性能指示						
控温范围 [°C]	0-80					
分辨率 [°C]	0.1					
波动度 [°C]	±0.5					
均匀度 [°C]	±1					
输入功率 [W]	1000	1000	1100	1350	2600	2600
定时范围 [min/h]	0-9999/0-9999（可切换）					
预约范围	公历预约					
编程控制	30段99周期					
内胆尺寸						
长度 [mm]	490	510	510	600	1220	1363
宽度 [mm]	390	390	450	640	585	670
高度 [mm]	610	760	1090	1050	1123	1123
外形尺寸						
长度 [mm]	630	650	650	745	1503	1505
宽度 [mm]	680	680	740	930	910	1006
高度 [mm]	1250	1400	1726	1695	1820	1811
载物托架						
数量[标配/最多] [块]	2/4	3/5	4/7	4/7	6/12	6/12
每层搁板承重 [Kg]	15					
制冷剂	R134a					

注：工作环境温度：10-30℃ 工作电源：220V+10V 50/60Hz 尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。



所有细节在线
www.shbxyl.com

隔水式培养箱

BG系列 佰博品系



应用范围:

隔水式培养箱是高精度恒温设备，可用于植物的发芽、组织、培养育苗、微生物的培养，昆虫、小动物的饲养，水质检测的BOD测定，以及其他用途的恒温试验，是生物遗传工程、医药、农、林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教育部门的理想设备。

产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能
- 工作室和钢化玻璃内门之间装有硅橡胶密封圈，以保证内门和工作室密封
- 工作室外壁左、右和底部采用隔水套加热，工作室装有一只低噪声小型风机促使空气循环，微风吹拂、保证箱内温度均匀性
- 可编程序设计，可设置10段100周期
- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能
- 标配RS-485接口
- 选配：打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警



性能参数:

型号	BG-50	BG-80	BG-160	BG-270
容积				
产品类型	50	80	160	270
性能指示				
产品类型	液晶显示升级型			
电源电压	AC 220V±10%/50Hz±2%			
加热方式	水套式			
控温范围 [℃]	室温+2~65			
温度波动度 [60℃]	±0.2			
温度分辨率 [60℃]	0.1			
输入功率 [W]	430	630	1030	1530
内胆尺寸				
长度 [mm]	310	400	550	600
宽度 [mm]	380	400	500	600
高度 [mm]	450	500	650	750
外形尺寸				
长度 [mm]	460	550	700	750
宽度 [mm]	510	530	630	730
高度 [mm]	765	815	965	1065
载物托架				
数量[标配/最多] [块]	2/4	2/4	3/5	3/6

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，工作环境温度：10~30℃

电热恒温培养箱

HPX系列 元博品系



应用范围:

电热恒温培养箱是供各医药、生物、农业、科研等部门作储藏、培养、科研的必备设备。

产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 温控系统采用微电脑单片机技术，控温、定时、超温报警
- 采用进口电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小
- 采用智能型控温仪控温，控温仪具有定时和计时功能
- 箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察
- 采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现更加优越
- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能



载物搁架



门把手



控制面板

电热恒温培养箱

BPX系列 佰博品系



产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控具有控温、定时、超温报警等功能；
- 采用进口电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小
- 风机6段调速
- 箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察
- 采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现更加优越
- 可编程序设计，可设置10段100周期
- 标配RS-485接口
- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能



载物搁架



温度传感器



控制面板

性能参数：

型号	HPX-9052MBE	HPX-9082MBE	HPX-9162MBE	HPX-9272MBE	BPX-52	BPX-82	BPX-162	BPX-272
性能指示								
产品类型	微电脑普通型				液晶显示升级版			
电源电压	AC 220V±10%/50Hz±2%							
控温范围[℃]	室温+5-65				室温+5-85			
温度分辨率[℃]	0.1							
温度波动度[℃]	±0.5 (37℃时)							
温度均匀度[℃]	±1 (37℃时)							
输入功率[W]	300	450	450	750	300	450	450	750
内胆尺寸								
长度 [mm]	350	450	550	600	350	450	550	600
宽度 [mm]	380	430	520	570	350	400	490	540
高度 [mm]	350	450	550	750	350	450	550	750
外形尺寸								
长度 [mm]	640	740	840	890	640	740	840	890
宽度 [mm]	556	606	696	746	485	535	625	675
高度 [mm]	505	605	705	905	525	625	725	925
载物托架								
标配/最多[块]	2/4	2/5	3/7	3/10	2/4	2/5	3/7	3/10
稳定时间 [min]					≤20			
定时范围	0-999h				0~9999min/0~9999h (可切换)			

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。



所有细节在线
www.shbxyi.com

电热恒温培养箱

BXP系列

■ 仟博品系



应用范围：

此款电热恒温培养箱，控温精度高，热分布好，适用于室温+5℃以上到100℃的所有恒温实验，风速支持6级可调。



产品特点：

- LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态
- BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 具备倒计时预约功能，预约时间范围为99小时59分钟
- 可编程设计：10段100周期程序设定
- 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行
- 风机6段调速，可保证培养物不同风速的要求

结构特点：

- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 双层门设计，具备全景钢化玻璃内门，开外门观察不影响内部温度
- 抽屉式载物搁架防倾倒承重大
- 标配1路485接口



载物搁架



热开关


大屏幕液晶显示
设置温度及实际
温度直观可视
运行状态显示



液晶触摸屏

工作状态显示
风速可调
触摸式按键

产品结构图（以BXP-280为例）

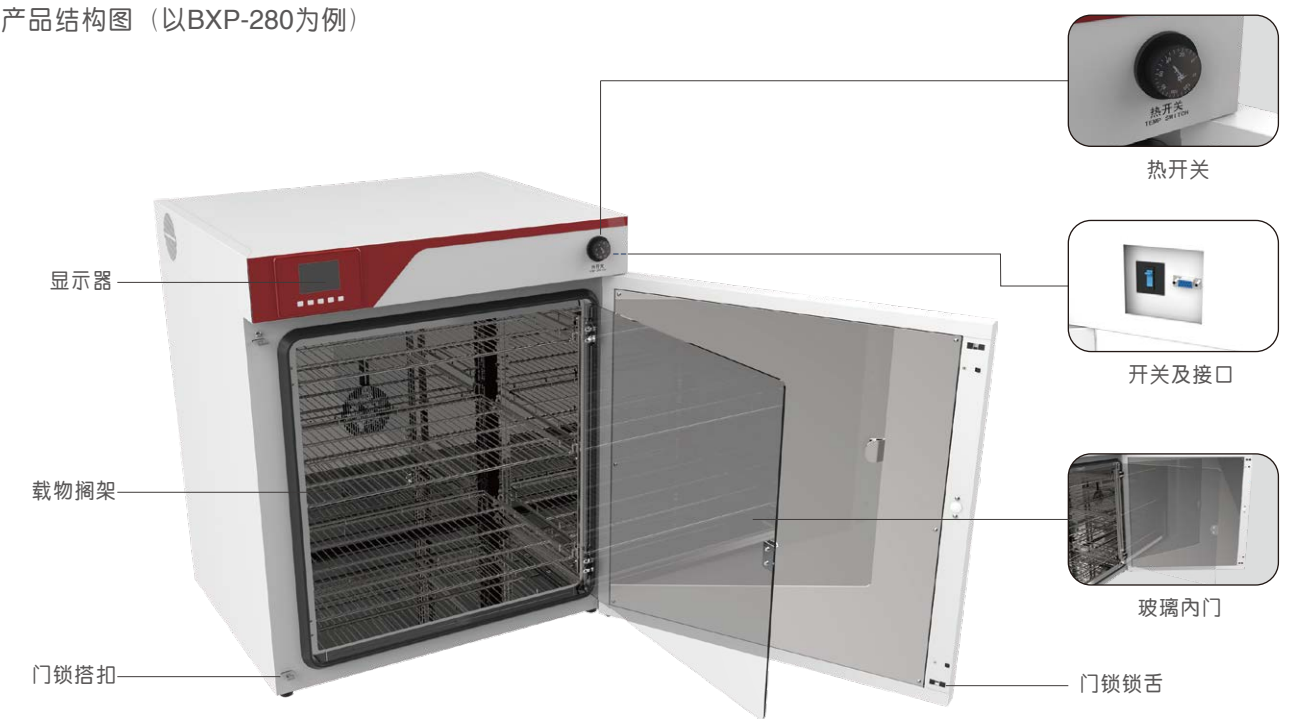

性能参数:

型号	BXP-65	BXP-130	BXP-210	BXP-280	BXP-450
容积					
容积 [L]	64	129	210	284	452
性能指示					
控温范围 [°C]	RT+5~100				
升温时间 [60°C]	16	20	15	15	25
温度波动度 [60°C]	±0.3				
温度均匀度 [60°C]	±0.6	±0.5	±0.8	±0.8	±0.8
额定功率 [kw]	0.5	0.5	0.75	0.95	1.5
30S恢复时间[60°C] [min]	14	13	10	10	11
内胆尺寸					
长度 [mm]	410	570	630	720	600
宽度 [mm]	350	400	530	530	580
高度 [mm]	450	570	630	745	1300
外形尺寸					
长度 [mm]	555	715	775	865	774
宽度 [mm]	566	616	746	746	845
高度 [mm]	722	842	902	1017	1704
载物托架					
数量[标配/最多] [块]	2/5	2/7	3/7	3/9	4/13
是否支持重叠码放/层数	是/两层	是/两层	是/两层	否	否

注：所有技术数据均在（25℃，70%RH，220V±10%）环境下测得。尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，本公司随时保留更改技术参数的权利

微生物培养箱

BXP-S系列

■ 万博品系



应用范围:


此款培养箱控温精度高，热分布好，适用于室温+5℃以上到100℃的所有恒温实验，并且循环风速可调，换风量可调。培养箱具备强大的数据管理功能，保证了培养过程数据的可追溯性。另外，这款培养箱制作工艺精良，无任何粉尘污染，特别适合洁净实验室使用。

产品特点:


- 5寸高清触摸屏，BRIGHT II控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 可实时查看仪器温度记录数据和曲线，报警记录信息等
- 多级密码管理功能，防止随意操作
- 带有预约功能，可按照公历时间进行预约
- 可编程程序设计，可设置30段99周期
- 带有程序升温功能，可控制升温 and 降温速率
- 带有数据储存功能，可储存10年数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯
- 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保设备无人值守时的安全运行
- 风机6段调速，可保证实验样品不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 可10段控制排风口开度，可满足不同换气速率需求，保证不同培养物的差异化需氧量



操作主界面

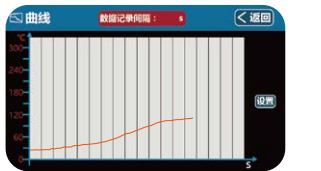

数据曲线查看

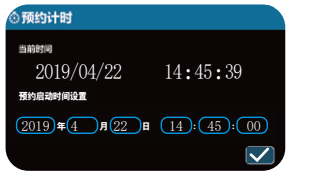

预约计时界面




U盘导出界面

结构特点:

- 预热控设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用铝箔全封闭5cm超厚保温层，保温效果好，玻璃纤维零泄漏，适合洁净实验室使用
- 双层门设计，具备全景钢化玻璃内门，开外门观察不影响内部温度
- 抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位
- 标配 有2个485接口和1个USB接口

产品结构图（以BXP-280S为例）

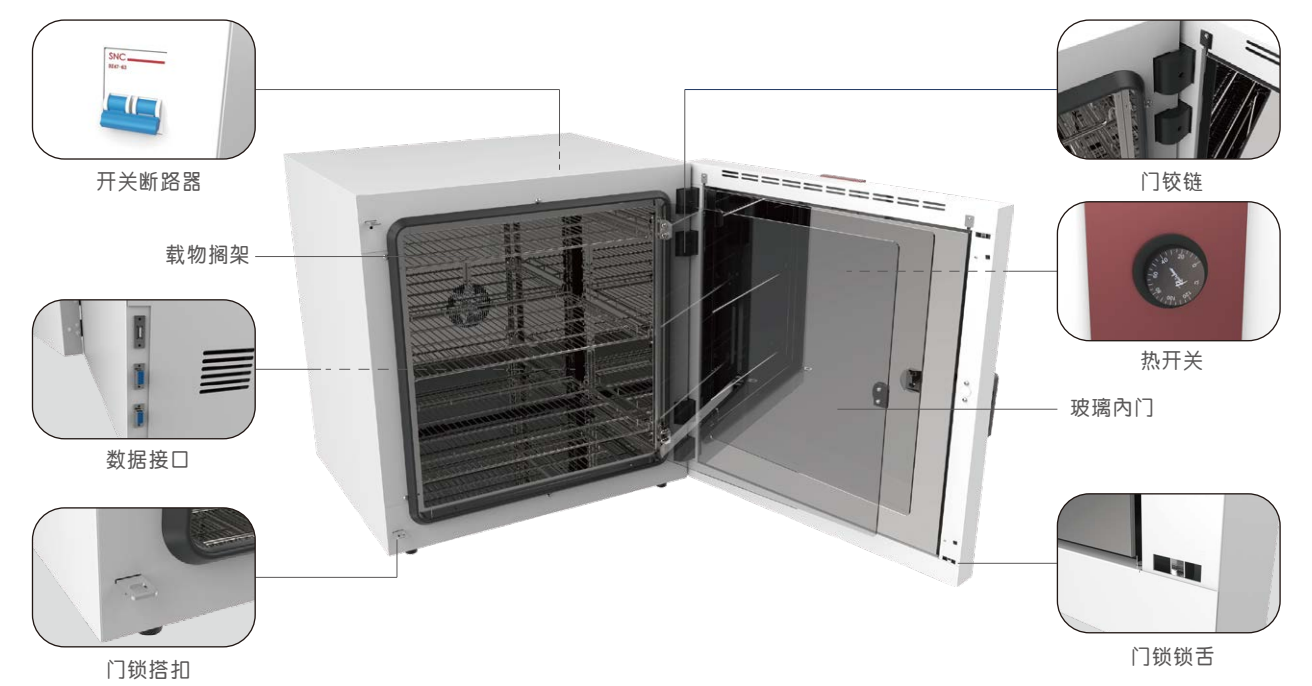

性能参数：

型号	BXP-65S	BXP-130S	BXP-280S	BXP-450S	BXP-530S
性能指示					
控温范围 [℃]	RT+5-100				
升温时间 [60℃]	16	20	15	25	25
波动度 [60℃]	±0.3				
均匀度 [60℃]	±0.6	±0.5	±0.8	±0.5	±0.5
额定功率 [kw]	0.55	0.55	1	1	1
30S恢复时间[60℃] [min]	14	13	10	11	11
内胆尺寸					
长度 [mm]	410	570	720	600	1070
宽度 [mm]	350	400	530	580	595
高度 [mm]	450	570	745	1300	835
外形尺寸					
长度 [mm]	575	735	885	774	1235
宽度 [mm]	608	658	788	845	850
高度 [mm]	637	757	932	1574	1080
载物托架					
数量[标配/最多] [块]	2/5	2/7	3/9	4/13	3/12
是否支持重叠码放/层数	是/两层	是/两层	否	否	否

注：所有技术数据均在（25℃，70%RH，220V±10%）环境下测得。尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，本公司随时保留更改技术参数的权利



所有细节在线
www.shbxyl.com

二氧化碳细胞培养箱

BC-J系列

佰博品系




应用范围：

二氧化碳细胞培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程必备的关键设备，广泛应用于微生物、农业科学、药理学研究和生产。

产品特点：

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 高亮度液晶屏显示，智能化控制，可同时显示温度、湿度、二氧化碳浓度（热导传感型无湿度显示）
- 温度控制具有超温声光报警功能
- 红外传感型：采用进口红外浓度传感器，二氧化碳浓度检测反应灵敏精度高；内部配置消毒紫外灯杀菌，可有效杀灭细菌、霉菌、支原体等微生物
- 热导传感型：具有90℃高温高湿消毒功能
- 采用高效过滤器：直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤器效果高达99.998%
- 选用进口离心风机，噪音低，寿命更长，配于合理的风道结构，使培养箱加热升温快且均匀性好
- 采用芯片自动抑制控制，控制系统温度双传感器的设立，可有效避免培养过程中打开箱门造成内腔温度波动度大
- 采用进口湿度传感器，可实时显示湿度
- 温度控制具有超温声光报警功能
- 采用门加热控制系统，可有效避免内玻璃门结露现象
- 特殊工艺制造确保腔体的严密性，保证浓度长时间自动维持
- 标配1路RS-485接口
- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能
- 选配：打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警

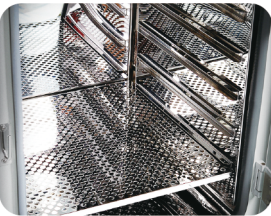

载物搁板



过滤器



门封条



控制面板



紫外灯

二氧化碳细胞培养箱

性能参数:

型号	BC-J80	BC-J160	BC-J80	BC-J160	BC-J250	BC-J80	BC-J160	BC-J250
产品类型								
产品类型	水套红外	水套红外	气套红外	气套红外	气套红外	气套热导	气套热导	气套热导
电压/功率								
电源电压	AC 220V±10%/50Hz±2%							
输入功率 [W]	600	900	700	800	850	700	800	850
加热								
加热方式	水套式	水套式	气套式	气套式	气套式	气套式	气套式	气套式
温度								
控温范围 [℃]	室温+5—60							
温度分辨率 [℃]	0.1							
温度波动度 [℃][37℃]	≤±0.3		≤±0.2					
温度均匀度 [℃][37℃]	≤±0.5		≤±0.5					
CO ₂								
CO ₂ 控制范围	0-20%					0-19.9%		
CO ₂ 控制方式	红外传感器					TCD热导式		
CO ₂ 恢复时间 [min]	≤浓度值×1.2min					≤浓度值×2min		
加湿								
加湿方式	自然蒸发							
容积								
容积 [L]	80	160	90	160	250	90	160	250
内胆尺寸								
长度 [mm]	420	540	420	540	600	420	540	600
宽度 [mm]	400	490	400	490	600	400	490	600
高度 [mm]	550	680	550	680	770	550	680	770
外形尺寸								
长度 [mm]	562	682	580	700	840	580	700	840
宽度 [mm]	521	611	560	650	775	560	650	775
高度 [mm]	960	1090	900	1030	1175	900	1030	1175
载物托架								
标配/最多 [块]	2/4	3/5	2/4	3/5	3/7	2/4	3/5	3/7

注：工作环境温度：10-30℃ 尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。



所有细节在线
www.shbxyl.com

光照培养箱

BSG系列佰博品系



应用范围:

光照培养箱是具有模拟自然光条件的多功能培养箱，适用于植物的生长组培养、种子发芽试验、植物的栽培与育种、昆虫及小动物饲养、微生物、抗生物的培养、保存及其他恒温、光照实验。

产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 微电脑智能控制，液晶显示温度、时间、光照度，并带有超温报警功能
- 幅流送风和提升对流循环形式，确保每层面空气的流动性和温度均匀性
- 箱体顶部配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm
- 采用国际知名品牌压缩机和循环风道、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能
- 标配机械锁，防止任意开门，并配有玻璃观察内门
- 集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用
- 可编程程序设计，可设置30段99周期
- 光照度六级可调，采用三维布光方式，提高均匀性
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失
- 标配1路RS-485接口



光照板



玻璃门锁



控制面板

人工气候箱

BIC系列佰博品系



应用范围:

人工气候箱适用于环境保护、农林畜牧业等科研单位、院校实验室、生产部门，作为霉菌、细菌和微生物的培养保存、植物栽培、育种实验的专用恒温恒湿、光照设备，能准确模拟不同环境的气候条件。

产品特点:

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 微电脑智能控制，液晶显示温度、时间、光照度，并带有超温报警功能
- 幅流送风和提升对流循环形式，确保每层面空气的流动性和温度均匀性

- 箱体顶部配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm
- 采用国际知名品牌压缩机和循环风道、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能
- 标配机械锁，防止任意开门，并配有玻璃观察内门
- 集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用
- 可编程序设计，可设置30段99周期
- 光照度六级可调，采用三维布光方式，提高均匀性
- 采用表面蒸发加湿和进口湿度传感器，并外配大容量水箱可长时间连续使用
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失
- 标配1路RS-485接口



玻璃门锁



机械门锁



载物搁架



性能参数：

型号	BSG-250	BSG-300	BSG-400	BSG-800	BIC-250	BIC-300	BIC-400	BIC-800	
容积									
容积 [L]	250	300	400	800	250	300	400	800	
性能指示									
产品类型				液晶显示升级型无氟制冷环保型					
控温范围 [℃]				无光照时0-60，有光照时10-60					
分辨率 [℃]				0.1					
波动度 [℃]				±0.5					
均匀度 [℃]			±1 (37℃时)	±1.5 (37℃时)	±1 (37℃时)			±1.5 (37℃时)	
控湿度				/					控湿范围：60%-90%，湿度波动：+5%
光照强度 [Lux]				0-15000（分六级可调）					
输入功率 [W]	1300	1500	1500	3300	1600	1900	1900	4500	
定时范围 [min]				0-9999					
内胆尺寸									
长度 [mm]	480	540	554	1220	480	540	554	1220	
宽度 [mm]	480	520	610	585	480	520	610	585	
高度 [mm]	1100	1100	1148	1123	1100	1100	1148	1123	
外形尺寸									
长度 [mm]	710	770	783	1633	710	770	783	1633	
宽度 [mm]	775	815	905	910	775	815	905	910	
高度 [mm]	1770	1770	1818	1820	1770	1770	1818	1820	
载物托架									
数量[标配/最多] [块]	4/7	4/7	4/7	6/12	4/7	4/7	4/7	6/12	

注：工作环境温度：10-30℃ 工作电源：220V+10V 50/60Hz 尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。

层照培养箱

BXG系列

■ 仟博品系



温度



光照




湿度(选配)

应用范围：

本产品广泛适用于植物的种子发芽、幼苗培育、植物组培、微生物培养、拟南芥培养、果蝇培养等。

产品结构图（以BXG-250为例）

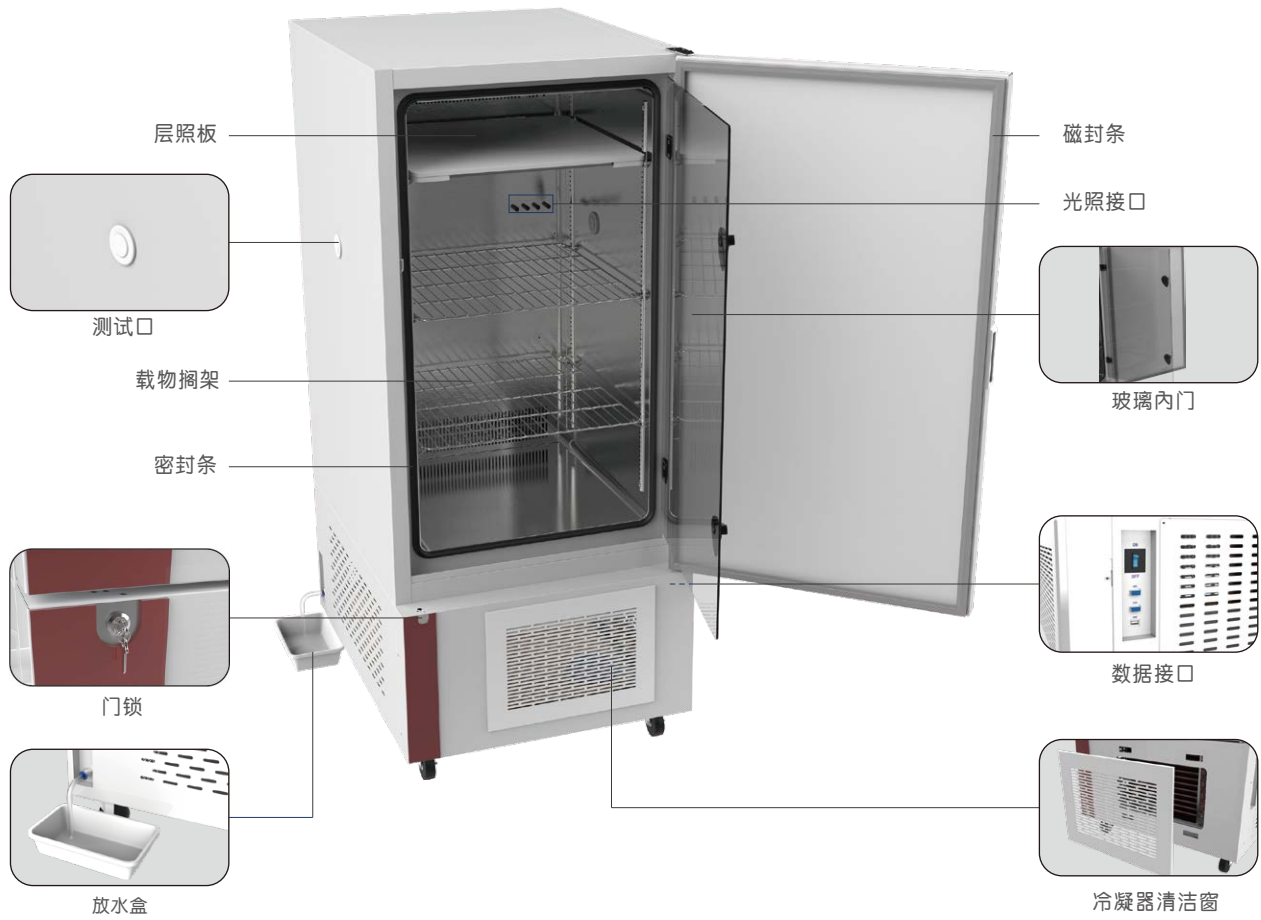

结构特点：


- 双层门设计，具备全景玻璃观察内门，避免样品观察时造成参数波动
- 设备配置USB接口、RS485接口各1个
- 具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便客户定期进行冷凝器清洁
- 具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统
- 内控采用圆角式设计，方便清洁
- 门封采用高级磁封结构，密封效果好，开关门时比机械压扣密封结构操作省力

产品特点:

- 4.3寸LCD液晶触摸屏，触摸式操作，显示直观，操作便捷
- BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 程序化多段数参数设置：30段99周期设计
- 数据管理功能：支持25万条数据存储、查看并以不可更改格式导出
- 事件管理功能：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，且支持时间记录通过USB导出
- 密码管理功能：多级密码管理，可防止随意操作
- 变频式制冷系统，开门后温度能快速恢复，确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行
- 具备内门防雾系统，避免打开外门时影响样品观察，并大大降低内门冷凝结露风险
- 采用进口节能环保压缩机、进口高性能风机、原装进口高精度温度传感器
- 完善保护功能：上下限超温报警、超温停机保护、门开报警、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护

光照控制特点:

- 采用搁板式光源，避免培养物受光不均的问题，层照板可以任意调节高度以适应不同植物生长高度
- 采用高端进口光照传感器，对培养物实际光照接收值实时监控并累计，确保光照单因素影响实验的可重复性
- 光照强度采用无级调控设置，可以直接按需求光照值设定光照强度
- 光源采用全光谱的高光强植物LED灯，最大光强可以达到30000LUX以上

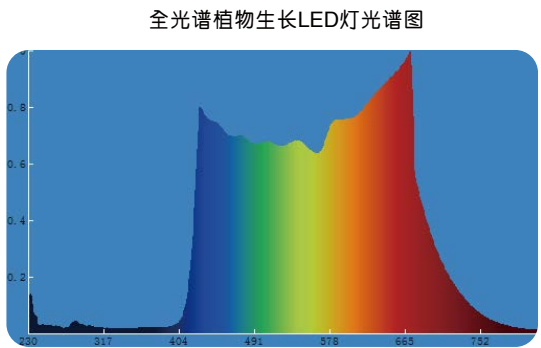

波长 (nm)		作用效果
红外线	IR-A	1400~1000
	红色	780
	红黄色	700
	绿黄色	660
	蓝色	610
可见光线	UV-A	510
	UV-B	430~440
	UV-C	400~315
	UV-D	280
	UV-E	100
作用效果		只产生热量，对植物没有特殊的作用。
作用效果		对植物生长有特别的增长促进效果的波长
作用效果		控制苗发芽
作用效果		光合作用大,有效的波长领域
作用效果		害虫防御
作用效果		有出色的光线透射性
作用效果		光合作用大，叶绿素作用大，防止害虫
作用效果		光合作用大
作用效果		对多数的合成过程起重要作用，过强会危害植物。
作用效果		植物会急速枯萎


全光谱植物生长灯，比传统LED灯更适合植物培养！

湿度控制（选配）特点:

- 加湿采用高品质加热元件表面蒸发加湿，具备故障率低，稳定性好的特点
- 设备自带侧挂式大容量储水箱，节省空间，加水方便
- 湿度传感器采用原装进口高端湿度传感器



操作主界面操作主界面

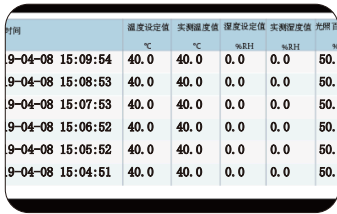

数据记录查询



USB数据导出



技术参数:

型号	BXG-150	BXG-250	BXG 400	BXG-800	BXG-1000	BXG-1600
容积						
容积 [L]	150	250	400	800	1000	1600
基础技术参数						
控温范围 [°C]	无光照时0-70，有光照时10-70					
分辨率 [°C]	0.1					
波动度25°C时	±0.5					
均匀度25°C时	±1	±1	±1.5	±1.5	±2	±2
光照强度 [LUX]	0-30000 (无级可调)					
输入功率[w]	1250	1450	1750	3100	3350	3350
定时范围	30段99周期/每1段9999小时					
内胆尺寸						
长度 [mm]	510	510	600	1220	1363	1363
宽度 [mm]	390	450	640	585	670	800
高度[mm]	760	1090	1050	1123	1123	1500
外形尺寸						
长度 [mm]	650	650	745	1503	1505	1505
宽度 [mm]	680	740	930	910	1006	1136
高度 [mm]	1400	1726	1695	1820	1811	2188
开门结构	单开门	单开门	单开门	双开门	双开门	双开门
托架[标配/最多] [块]	1/4	2/7	2/7	4/12	4/12	4/12
层照板[标配/最多]	1/2	2/3	2/3	4/6	4/6	4/8
湿度扩展技术参数						
控温范围 [°C]	(无湿度同基础) 有湿度无光照时10-60，有湿度有光照时15-60					
控湿范围	30%-95%	30%-95%	30%-95%	35%-95%	35%-95%	35%-95%
湿度波动	±3%	±3%	±3%	±5%	±5%	±5%
输入功率 [W]	1850	2050	2350	3700	3950	3950

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。